

■ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एक बार खुराक का इंजेक्शन लगाने पर मुझे क्या करना चाहिए?

सुई की बाहरी टोपी को बदलें और टोपी लगी सुई को खोलें. पेन टोपी को बदल दें.

मुझे अपने पेन को कहाँ रखना चाहिए?

HumaPen® SAVVIO™ को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, पूर्ण इन्सुलिन भंडारण निर्देश के लिए Lilly 3ml इन्सुलिन कारतूस उपभोक्ता जानकारी पत्रक (पैकेज डाला गया है) को देखें.

अगर मैं काटरज धारक को पेन बाडी के साथ ना जोड़ सकूँ तो क्या होगा?

यह जाँच लें कि कारतूस पूरी तरह से कारतूस धारक में डाला गया हो. धारक को पेन बाडी के साथ लाइन में करें और सुरक्षित होने तक घुमाएँ.

अगर मुझे कारतूस में हवा के बुलबुले दिखाई दें?

पेन क करने के बाद भी कारतूस में छोटे हवाई बुलबुले दिखाई दे सकते हैं. यदि आपने पेन को ठीक से पेन किया है तो यह छोटा सा बुलबुला आपकी इन्सुलिन खुराक को प्रभावित नहीं करेगा.

अगर मेरी पूरी खुराक को डायल न किया जा सके तो मुझे क्या करना चाहिए?

अगर आपकी खुराक, कारतूस में बची यूनिटों से अधिक है तो आप या तो अपने मौजूदा कारतूस में बची मात्रा का इंजेक्शन लगा लें और फिर अपनी खुराक पूरी करने के लिए एक नये कारतूस का उपयोग करें, या पूरी खुराक का इंजेक्शन एक नये कारतूस में से लगाएँ.

अगर टीका लगाते समय इंजेक्शन बटन दबाने में मुश्किल हो तो क्या होगा?

आपकी सुई भर कर अटकी हो सकती है. नई सुई लगा कर पेन को पराइम करें. इंजेक्शन बटन को जलदी से दबाने के कारण भी बटन दबाने में कठिनाई हो सकती है. बटन को धीरे धीरे दबाने कीकोशिश करें.

एक बड़े व्यास की सुई का प्रयोग इंजेक्शन बटन को दबाने में आसानी कर देगा. आपके लिये कौन सी सुई सबसे अच्छी है, यह अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पूछें.

HumaPen® savvio™

*अतिरिक्त जानकारी या अधिक विस्तृत निर्देशों के लिए, HumaPen® SAVVIO™ की पैकेजिंग में रखी यूजर मैनुअल या कविक गाइड की समीक्षा करें

अगर आपके पास HumaPen® SAVVIO™ के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है या सहायता की आवश्यकता है तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता व लिली कसटमर रिस्पांस सेंटर से 1-888-545-5972 पर संपर्क करें या लिखें :

Eli Lilly Canada Inc.
3650 Danforth Avenue,
Toronto, ON M1N 2E8.

■ HumaPen® SAVVIO™
को उपयोग करने के कदम

HumaPen® savvio™



HumaPen® SAVVIO™
डिज़ाइन किया गया है

- उपयोग करने के लिए आसान
- सही और टिकाऊ
- पसंद के रंगों में उपलब्ध

Member
R&D

HumaPen® is a registered trademark of Eli Lilly and Company, used under license.
SAVVIO™ is a trademark of Eli Lilly and Company; used under license.


© 2013, Eli Lilly and Company. All rights reserved.

CADVC00025H

Lilly


Lilly

■ अपने HumaPen® SAVVIO™ के बारे में जानिये

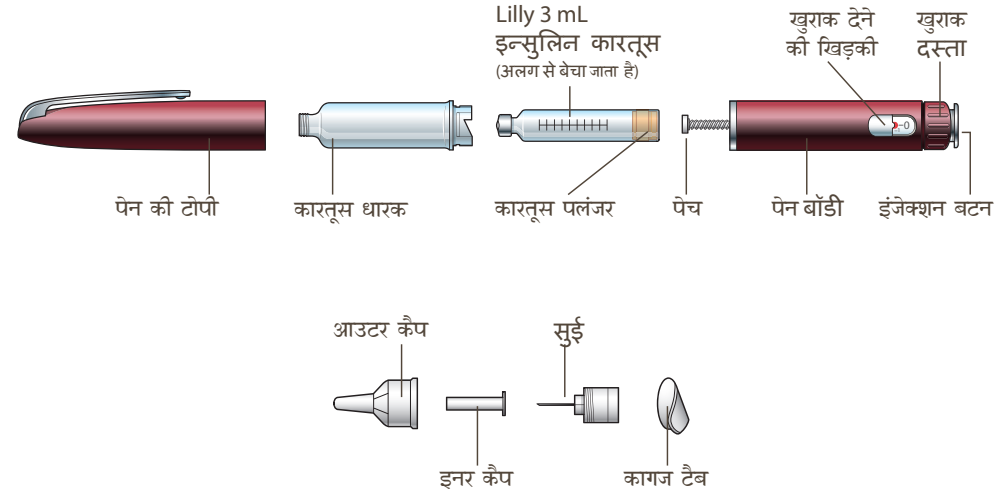


■ 1. 3 mL का कारतूस डालने की विधी


इसे डालने से पहले इन्सुलिन कारतूस का निरीक्षण कीजिय

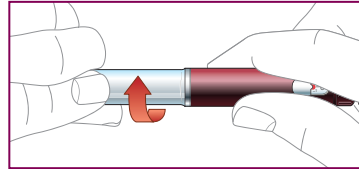


इसे अलग करने के लिये कारतूस धारक को घुमाएँ

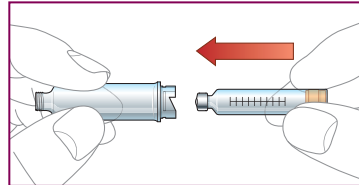

कारतूस के छोटे सिरे को डाले

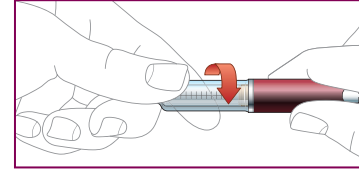


कारतूस धारक को पेन की बाँड़ी में सीधा धकेल दें
कारतूस धारक को पेन की बाँड़ी में तब तक घुमाएँ जब तक आप क्लिक को महसूस ना करें

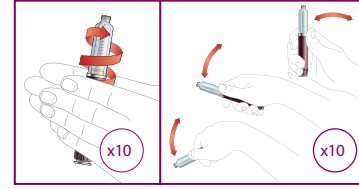


केवल धुंधली इन्सुलिन के लिये: पेन को धीरे धीरे 10 बार घुमाएँ और इन्सुलिन मिश्रण करने के लिए 10 बार उल्टा सीधा करें


■ 2. सुई को जोड़ने के लिए

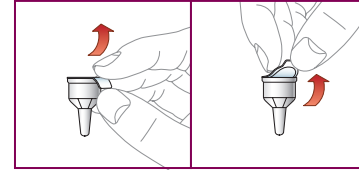


कागज टैब निकालें और सुई जोड़ दें

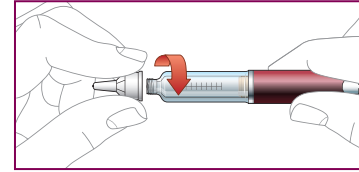

सुई को कारतूस धारक में सीधा तब तक घुमाएँ जब तक वह सुरक्षित न हो जाए

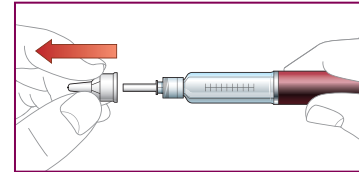


आउटर कैप को खींच कर रख लें

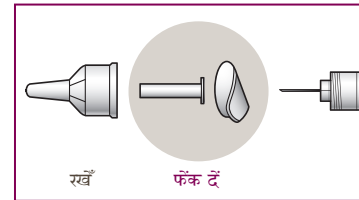


इनर कैप को खींच कर फेंक दें.

■ 3. पेन को पराइम करना


सुई या कारतूस में से हवा निकालने में मदद करने के लिये प्रत्येक प्रयोग करने से पहले पेन को पराइम करें. अगर पेन पराइम नहीं किया गया तो आपको बहुत अधिक या बहुत कम इन्सुलिन मिल सकती है.

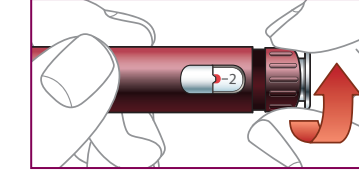

2 यूनिट तक मापें

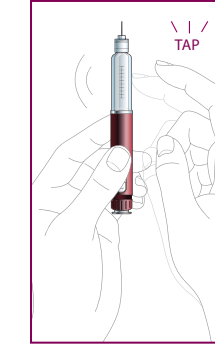


हवा को ऊपर तक भेजने के लिए कारतूस धारक को थपथपाएँ

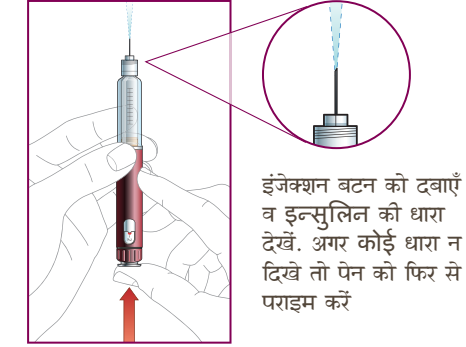

इंजेक्शन बटन को दबाएँ व इन्सुलिन की धारा देखें. अगर कोई धारा न दिखे तो पेन को फिर से पराइम करें

■ 4. अपनी खुराक का इंजेक्शन लगाते समय


अपनी खुराक को घुमाकर मापें, यदि आप ने बहुत ज्यादा यूनिट माप ली है तो आप इसे ठीक करने के लिये पीछे घुमा सकते हैं.

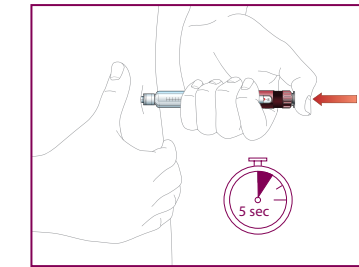

सुई लगाएँ. अपना अंगूठा इंजेक्शन बटन पर रखें और तब तक दबाएँ जब तक बटन आगे बढ़ना बंद ना हो जाए.

बटन को 5 सेकंड के लिए पकड़ें.

अपनी त्वचा से सुई निकालें.

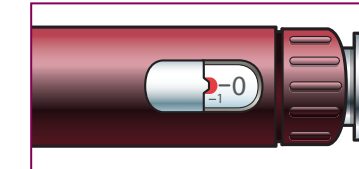

पूरी खुराक के इंजेक्शन की पुष्टि करने के लिए खुराक खिडकी में से 0 की जाँच करें.